



































M2720A Avalon CTS juhtmeta looteandursüsteem

Hoiatused ja mida nendega peale hakata

Põhijaama hoiatused:  vilgub üksi või koos kõrvalasuvate lampidega.  tähendab, et lamp on väljas/ stabiilselt sees.

 tähendab, et kuulete märguannet, kui määratud. Vaigistamiseks vajutage .

Anduri hoiatused:  vilguvad koos probleemi allikale viitava sümboliga.

Kui hoiatus tekib...		...Tehke järgnevat...
...Põhijaamal...	...Anduril...	
   + 		Asetage andur aku laadimiseks oma kohale või asendage see laetud anduriga.
   + 	 + 	Kui probleem püsib pärast 30-minutist laadimisperioodi, vahetage anduri aku. (Vt Hooldusjuhendit.)
   + 		Kontrollige, et andur on aktiivne ja levi piirkonnas. Kontrollige antenni ühendust.
  	 + 	Vajutage kahe sekundi jooksul  , et blokeeritud pesa vabastada.
 Vooditähise näidis	 +  + --	Sellel pesal on juba aktiivne andur (selles näites on voodi tähis 38).
 Vooditähise näidis	 +  + 16 Vooditähise näidis	Kas asetage see esimesena dokki, et pesa vabastada või paigutage see oma põhijaamale, kui anduril kuvatakse vooditähis (selles näites 16).
	 + 	Kutsuge teenindus (andurit ei saa registreerida).
	 + 	Aktiivse EKG anduri korral ühendage kaabel. Paigutage andur pesa vastavalt täpi poolt viidatud asendile (vales pesas olev andur).


Põhijaama ja anduri veateated (E0 kuni E9): Vt kasutusjuhendit



M2720A Avalon CTS juhtmeta looteandursüsteem

Kiiralustusjuhend

1 Vahelduvvool 110 - 240 V

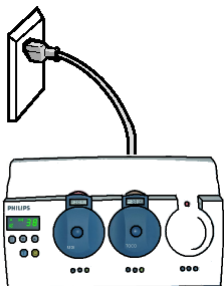


3


TELE

Kontrollige, et lootemonitoril kuvatakse „TELE”, mis viitab heale ühendusele Avalon CTS-ga


2 Lülitage toide sisse

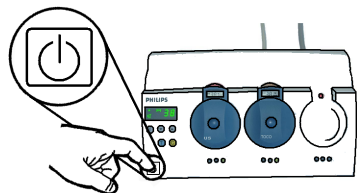

4 Oodake, kuni süttib lamp „valmis”

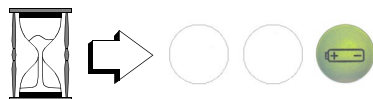


5 Eemaldage andur

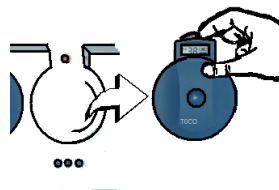

„Valmis” lamp kustub: Süttib „RS ühenduse” lamp.



6 Paigaldage andur (kasutage ultraheligeeli)

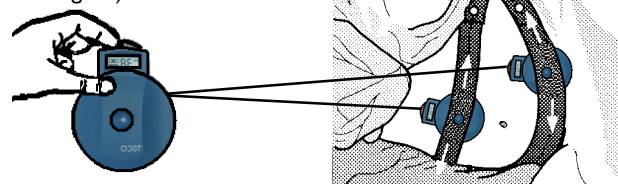


Seejärel kindlustage asend, kus teil on võimalik hea signaal:




Avaloni monitoride korral



50 seeria monitoride korral

UH-lt VEKG jälgimisele lülitumine	
1	Asetage UH andur oma kohale.
2	Võtke EKG andur välja siis, kui vastava pesa lamp  on roheline.
3	Ühendage VEKG adapterikaabel ning loote koljuelektrood EKG anduri külge.
4	Alustage VEKG jälgimisega.

VEKG-lt UH jälgimisele lülitumine	
1	Lahutage VEKG adapterikaabel ning loote koljuelektrood EKG andurist.
2	Asetage EKG andur oma kohale.
3	Võtke UH andur välja siis, kui vastava pesa lamp  on roheline.
4	Alustage ultrahelijälgimist.

Lahutage enne Avalon CTS-i kasutamist kõik juhtmega looteandurid monitorist.

Samale põhijaamale LPS-i edastavad kaks aktiivset andurit põhjustavad veateadet **E9**. Vea kõrvaldamiseks asetage üks anduritest dokki.

Pärast kasutamist: Puhastage andurid. Seejärel paigutage sobivasse põhijaama pesa.